




Velvet Skin

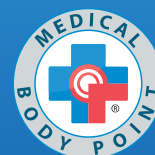

Velvet Skin

Velvet Skin risponde alle più recenti richieste del mercato in ambito medico estetico. Trattamenti mirati non invasivi e mini invasivi, per mantenere o ristabilire l'armonia delle forme naturali, valorizzando l'aspetto di ogni singola persona.

Una bellezza pulita e naturale, sempre senza dimenticare comfort e piena sicurezza per il professionista e per il paziente.



TECNOLOGIE

Radiofrequenza capacitiva, resistiva ed elettroporazione in medicina estetica.

TRATTAMENTI FRUIBILI



RUGHE E MICRO-RUGHE

Rughe frontali, zampe di gallina, rughe periorculari, pieghe naso-labiali, rughe perilabiali...



RILASSAMENTI E IPOTONIE

Ipotonie muscolari, cedimenti di seno e braccia, cedimenti da dimagrimento, lassità di mento e guance...



ADIPOSITÀ LOCALIZZATE

Cuscinetti, maniglie dell'amore, accumuli adiposi su braccia e gambe, grasso addominale...



INESTETISMI DELLA TEXTURE CUTANEA

Acne, smagliature, macchie, cicatrici, disidratazione cutanea...



INESTETISMI CELLULITE

Cellulite, pelle a buccia d'arancia...

RADIOFREQUENZA

Si tratta della somministrazione di calore in una regione prestabilita del corpo umano. L'energia calore non viene applicata dall'esterno ma viene creata **un'appropriata condizione biofisica** finalizzata ad indurre calore endogeno. Detta energia "biocompatibile" ceduta ai substrati biologici, esplica la sua azione con due effetti sinergici: l'innalzamento del potenziale energetico delle membrane cellulari e l'aumento della temperatura profonda (endogena) non per cessione di energia, ma per incremento fisiologico indotto.

La tecnologia, dotata di un generatore digitale di radiofrequenza, **permette di settare via software due frequenze** (500KHz e 1MHz) in modo da essere più selettivi sulla profondità di azione.

Il calore endogeno generato agisce con una biostimolazione selettiva dei tessuti atrofici innescando risposte fisiologiche di miglioramento. Il software della tecnologia offre la possibilità di modulare, secondo le esigenze del paziente, le modalità di funzionamento:

- Capacitiva
- Resistiva
- Monopolare
- Bipolare

Quanto sopra è finalizzato ad ottenere una **spiccata compliance** per il trattamento, con assoluta assenza di dolore.

ELETTROPORAZIONE

Sistema per veicolazione transdermica non invasiva di principi attivi allopatrici, omeopatici, omeotossicologici o plasma ricco in piastrine (PRP).

Con l'applicazione su una superficie biologica di un particolare impulso elettrico si induce un **aumento transitorio della permeabilità dei tessuti**, favorendo l'assorbimento transcutaneo di principi attivi a rilascio controllato e a profondità predefinita.

Concentrazione più alta solo sui distretti target, minore assorbimento sistemico e conseguente diminuzione di "tossicità".




RADIOFREQUENZA
MONOPOLARE



RADIOFREQUENZA
BIPOLARE



RADIOFREQUENZA
GRANDI DISTRETTI

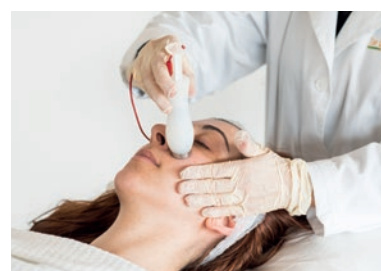


ELETTROPORAZIONE
MEDICALE

DOTAZIONE

1	1x211 cavo di alimentazione
1	1x211 base elettrica
1	1x211 trasduttore RF monopolare max
1	1x212 cavo 7 pin RF 300 cm
1	1x211 elettrodo max dim. 12mm
1	1x211 elettrodo max dim. 25mm
1	1x211 punta elettrodo a pinzetta
2	1x211 trasduttore RF mono a legare corpo
2	1x211 punta a legare
2	1x211 cavo punta a legare
3	1x211 trasduttore RF bipolare 2 punti elettrodi
3	1x211 cavo per elettroporazione
4	1x211 trasduttore elettroporazione mediale
4	1x212 cavo per connessione elettroporazione
4	1x211 punta a dente per elettroporazione
4	1x212 cavo per connessione punta a dente
4	1x212 siringa 5 Pz 5ml

TRASDUTTORI

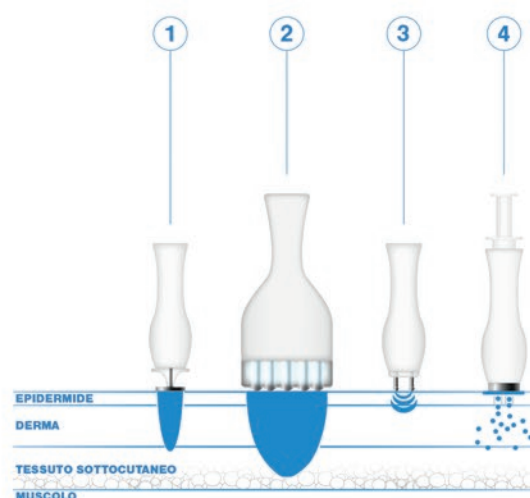

PLUS

	Feedback di impedenza del tessuto per adattare parametri terapeutici alle condizioni del paziente
500 kHz 1 MHz	Impostazione software a due frequenze: 500 kHz (azione profonda) e 1 MHz (azione superficiale)
	Possibilità di settare via software la modalità monopolare o bipolare grandi distretti e capacitiva o resistiva senza cambiare i trasduttori
	Trasduttori capacitivi senza vernice epossidica
	Programmi preimpostati secondo patologie e distretti
	Tutti i parametri sono visualizzati su un display ad alta definizione 15.6" color touch screen.
	Possibilità di sterilizzare in autoclave il trasduttore per elettroporazione
	Software Friendly Human-Machine Interface [FHMI] per un utilizzo semplice ed intuitivo.
	Clinical Data Software: software web based per la simultanea gestione di paziente e device.
	Dispositivo con alta potenza di calcolo, provvisto di connettività wi-fi.
4.0 INDUSTRY	In linea con i requisiti del "Piano Nazionale Industria 4.0" - Allegato A, Legge di bilancio 2017 (Legge 11/12/16, n.232)

SPECIFICHE TECNICHE

GENERICHE

Alimentazione 100-240 V, 50-60 Hz
Potenza Max assorbita 400 W
Classe di sicurezza elettrica I BF
Grado di protezione IP IP40
Temperatura di funzionamento 0-40 °C
Umidità di funzionamento 30-75% senza condensa

SPECIFICHE RF

Potenza Max in uscita RF 150 W o 50 ohm
Frequenza di emissione RF 500 kHz, 1000 kHz impostabile da software
Tipo di emissione: capacitiva e resistiva
Funzion: monopolare e bipolare

SPECIFICHE EP

Tensione Max EP 120 V o 1000 ohm
Frequenza Impulse EP max 300 Hz impostabile da software
Forma d'onda complessa, impostabile da software

SPECIFICHE MECCANICHE

Display 15.6" color touch con PC integrato
Dimensioni L 45 x A 55 x P 41 cm
Peso 7 kg

CONFIGURAZIONI

Gli optional permettono allo specialista di modulare la tecnologia secondo le proprie esigenze. Scegliendo quelli che rientrano nel suo campo di azione può ottimizzare i risultati ed aumentare la soddisfazione delle pazienti.



RF FRAZIONATA

Metodica che abbina l'azione termica della RF alla precisione di una distribuzione frazionata dell'energia tramite microaghi.

IN DOTAZIONE

RF211 trasduttore RF frazionata a 4 aghi



TRATTAMENTI FISIOTERAPICI

Il software permette, tramite manipoli già in dotazione, di implementare le indicazioni fisioterapiche ai trattamenti fruibili. L'optional consente di biostimolare i tessuti atrofici e veicolare principi attivi, garantendo miglioramenti tangibili in poche sedute.



RADIO SKIN

Radiofrequenza ablativa per interventi mini-invasivi.

IN DOTAZIONE

RF211 capo di alimentazione
RF211 trasduttore Radio Skin
RF212 aghi lunghi monopolarmente
RF213 aghi corti monopolarmente



RF INTRADERMICA

Ago che rilascia calore endogeno sotto gli inestetismi per un effetto riempitivo.

IN DOTAZIONE

RF211 capo RF intradermica
RF211 connettore ago intradermica
RF212 aghi RF intradermica sterili a
manuale (30mm - 45mm - 55mm)



GUANTI ELETTROCONDUTTIVI

Periferiche in fibra d'argento per elettroterapia.

IN DOTAZIONE

RF212 capo di guanti elettroconduttivi
RF212 cavi di connessione guanti
RF211 padella wireless per guanti
RF211 capo connessione padella
RF211 cablo di alimentazione per la padella



TMJ

Due trasduttori RF per indicazioni odontoiatriche. Ottimizzano la pratica clinica, intervengono nelle terapie contro i DTM e riducono i tempi di recupero degli interventi al cavo orale.

IN DOTAZIONE

RF211 trasduttore TMJ
RF211 trasduttore RF intracavitario

PRODOTTO IN ITALIA



*Apparecchiatura certificata MEDICAL DEVICE in conformità
alla direttiva 2007/47/CE correttiva della direttiva 93/42/CE*

Top Quality Group si riserva di variare i dati ivi riportati senza preavviso
e, comunque, tali dati non sono validi ai fini contrattuali.

www.topqualityaesthetic.it



Prodotto e distribuito da **TOP QUALITY GROUP Srl**
Via G. Sorel snc - Città di Castello (PG) Italy | +39 075 8520088 | info@topqualitygroup.it
www.topqualitygroup.it